



centrífuga
digital

FUGELAB-GB10

 nahita
blue

centrífuga angular, FUGELAB - GB10

Centrífuga angular de sobremesa controlada por microprocesador y equipada con motor de inducción libre de mantenimiento para la centrifugación de una amplia gama de tubos desde 5 mL hasta 15 mL (Consultar adaptadores).

Con programación digital mediante display LED y teclado sencillo de fácil manejo, el equipo se puede programar en RPM o FCR y dispone de memoria de último programa de centrifugación.

Cuenta con una amplia base metálica y patas robustas para una buena fijación a la superficie de trabajo que le permite desarrollar los programas de centrifugación de manera totalmente estable y silenciosa.

Indicado para técnicas de rutina en el laboratorio como son la concentración de suspensiones celulares, la separación de suero o plasma, etc.



centrífuga angular digital: **FUGELAB - GB10**

- [1] Carcasa y tapa ambas con base metálica.
- [2] Rotor y portatubos de plástico.
- [3] Programación en RPM o FCR.
- [4] Memoria de último programa realizado.
- [5] Función de pulsos cortos (Short Spin).
- [6] Aviso sonoro final y apertura automática de tapa.

- [7] Sistema de apertura de emergencia en caso de fallo del suministro eléctrico.
- [8] Doble sistema de seguridad en tapa con cierre electromagnético y mecánico.
- [9] Motor de inducción libre de mantenimiento.

- [1] Función de pulsos cortos
Short Spin



- [2] Rotor y portatubos de plástico.



- [3] Sistema de apertura de emergencia en caso de fallo del suministro eléctrico.



centrífuga angular, FUGELAB - GB10

centrífuga angular digital: FUGELAB - GB10 partes equipo



FUGELAB - GB10 parte trasera y lateral

Botón de apertura manual de emergencia



Parte trasera del equipo



centrífuga angular digital:
FUGELAB-GB10
características técnicas




Referencia	GBF010
Modelo	Fugelab-GB10
Cabezal	Angular
Capacidad máx.	12x15 mL
Rango velocidad	100- 4000 rpm (pasos de 10 en 10)
FCR máx.	1770 xg (pasos de 10 en 10)
RPM máximas	4000 r/min
Temporizador	1-99 min
Dimensiones (LxAxH)	485x375x290mm
Peso	16 kg
Alimentación	230VAC, 50/60Hz
Ruido velocidad máxima	≤65dB(A)

centrífuga angular, FUGELAB - GB10

centrífuga angular digital: **FUGELAB-GB10** accesorios

ADAPTADORES

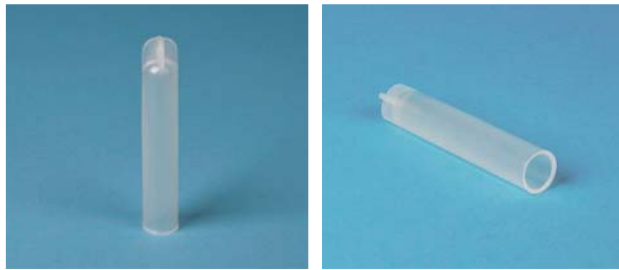

GBK002

Adaptador tubos 10 mL



GBK003

Adaptador tubos 5 - 7 mL

TUBOS DE CENTRIFUGACIÓN



BGD001

Tubo centrífuga cilíndrico



BGD002

Tubo centrífuga cónico, 16x110 mm



BGD010

Tubo centrífuga PP, 15 mL (Tipo Falcon)
FCR 3500g